

毎日の健康管理に! 指先で血中酸素ウェルネス!

血中酸素飽和度

脈拍数機能

カウンター機能

ストップウォッチ機能




HEALTH MANAGEMENT DEVICE

OXINAVI

オキシナビ

LED

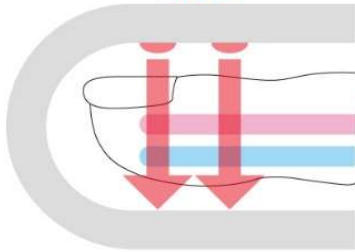

指を機器の中に入れて
LEDの光を血管に当て、
その透過光を測定します。

動脈
静脈



様々な用途で
お使いください

フィットネス

トレッキング

ウォーキング

ワンタッチ操作で

血中酸素飽和度と脈拍数を測定します!

どれくらいが標準※?

※一般に言われている基準です。

血中酸素飽和度



標準値は96~99%
と言われています。
※日本呼吸学会 HP より

脈拍数



一般成人 60~100[※]
※千葉県医師会公表資料より

ご不安な方は専門の病院等でご相談ください。

※画像はイメージです。※仕様については変更する可能性があります。

測定方法：2波長分光測定法

測定範囲：酸素飽和度 70~100%

脈拍数：30~250 B P M

測定精度：酸素飽和度 70~100%±2%

脈拍数：±2%または±2拍分


使用温湿度：5~40℃/15~80% R H

保存温湿度：-10~40℃/10~80% R H

本体サイズ：約W64×D39×H37 (mm)

本体重量：43 g (バッテリー含まず)

電源：単4型 1.5V×2本

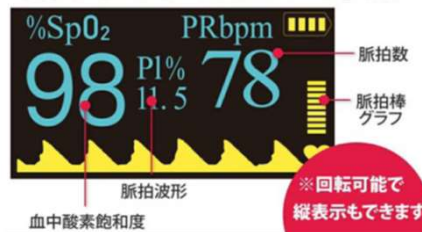

血中酸素飽和度とは?

血中酸素飽和度とは血液中の酸素の量の事でSpO2と呼ばれています。値は%で表し血液内の酸素の濃度が満タんだと100%、標準値で96~99%と言われています。

注意事項

血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみをもくてきたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。質問や健康上の問題がある場合は、医療の専門家に必ず相談してください。

*本製品はスポーツ用品・ウェルネス機器であり、医用機器ではありません。

商品 C D	794810
商品名	OXINAVI パルスオキシメーター
品番	TOA-OXINV-001
参考価格	¥3,200

お問い合わせは

株式会社 権藤本店

TEL 092-741-0252

FAX 092-741-4241